BabySensor Relax intelligens babafigyelő rendszer, beépített vezeték nélküli kommunikációs lehetőségekkel (Bluetooth, WiFi és 4G)

1. Mi az a BabySensor?

A BabySensor Relax egy csecsemőknek szánt, intelligens egészségfigyelő megoldás, amely a valós idejű biometrikus nyomon követést titkosított videókapcsolattal ötvözi, hogy gyermeke biztonságban legyen, Ön pedig nyugodt maradhasson.

Akkumulátor

• Bázisállomás: Beépített, nem eltávolítható, újratölthető lítiumakkumulátor
• Karkötő: Beépített, nem eltávolítható, újratölthető lítiumakkumulátor
• Kamera: Nincs benne akkumulátor, beltéri használatra, kizárólag WiFi-kapcsolattal működik

Felhasználási terület


Beltéren és kültéren egyaránt.

Folyamatos kapcsolat

A bázisállomásban és a karkötőben található akkumulátoroknak, valamint a beépített 4G-kapcsolatnak köszönhetően mindig hozzáférhet az egészségügyi adatokhoz, és értesítést kap, ha a gyermek sír.

Korosztály

Az érzékelő 0 hónapos kortól 5 éves korig használható.

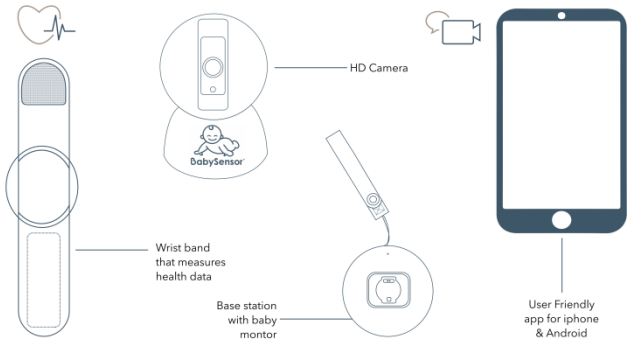


2. Mit tartalmaz a doboz?

• Viselhető érzékelő (BS01)
• Puha érzékelőpántok – 3 méretben
• Bázisállomás / Smart Gateway (BG01)
• Kamera (WiFi) (opcionális, csak a +CAM verziónál)
• USB-töltők és kábelek
• Bio pamut utazótok

3. Az összetevők csatlakoztatása

• Az érzékelő Bluetooth-on keresztül továbbítja a mérési adatokat a bázisállomásra
• A bázisállomás WiFi-n vagy 4G-n keresztül küldi az adatokat a felhőbe
• A kamera kizárólag WiFi-n keresztül továbbít élő videót
• Az alkalmazás valós időben jeleníti meg az adatokat és a riasztásokat

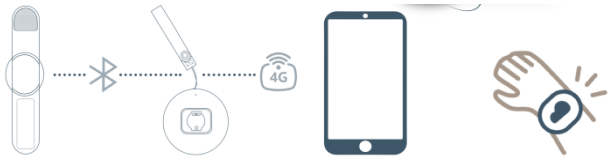

4. Első beállítás

1.Távolítsa el az érzékelő alatti védőfóliát. Töltse fel teljesen az érzékelőt és a bázisállomást is. A bázisállomás hátulján látható zöld fény jelzi a teljes feltöltöttséget.
2.Ellenőrizze a hálózatot – Győződjön meg arról, hogy telefonja 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz csatlakozik. A hálózat lehet kizárólag 2,4 GHz-es, vagy kombinált 2,4 / 5 GHz-es. Kizárólag 5 GHz-es hálózathoz nem lehet csatlakozni.
3.Töltse le az alkalmazást – Elérhető az App Store-ban és a Google Playen. Keressen rá a „Babysensor" kifejezésre.
4.A rendszer beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
5.Mielőtt csatlakoztatná a kamerát, győződjön meg arról, hogy az alkalmazás már fogadja az első pulzusadatokat.
6.Csatlakoztassa a tápkábelt a kamerához.
7.Ellenőrizze, hogy telefonja ugyanazon a 2,4 GHz-es WiFi-hálózaton van-e.
8.Lépjen a „Fogaskerék" (beállítások) / „Élő közvetítés" (Live stream) menüpontba, és kövesse a kamera beállítására vonatkozó utasításokat.
Videós útmutatóért kattintson ide.

5. Az alkalmazás használata

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a fő felület, ahol állapotüzeneteket láthat, funkciókat kapcsolhat be vagy ki, illetve innen érheti el az alkalmazás egyéb funkcióit és beállításait. (1.0. ábra)

•Éjszakai fény be-/kikapcsolása
•Fehér zaj be-/kikapcsolása
•Mikrofon be-/kikapcsolása
•Mikrofon érzékenységének beállítása (tartsa lenyomva az ikont 2 másodpercig)
•Értesítések be-/kikapcsolása
•Akkumulátorállapot ellenőrzése
•Útmutató megtekintése
•Élő videó megnyitása
•Részletek megtekintése (szenzoradatok)
•Oktatóanyag indítása
•Értesítési archívum
•Beállítások megnyitása (1.6., 1.7. ábra)

Részletes nézet: (1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ábra)

Ezen az oldalon az érzékelők aktuális adatai láthatók. Az adatokra koppintva beállíthatja azokat a határértékeket, amelyek meghatározzák a zöld, sárga és piros tartományokat. Emellett az egyes érzékelőket külön-külön is be- vagy kikapcsolhatja. A korábbi adatok (az elmúlt 3 nap) megtekintéséhez lépjen a Fogaskerék ikonra, majd válassza a „Korábbi adatok" (Historical data) menüpontot.

Kamera élő közvetítés (1.5. ábra)

Csatlakozik a kamerához, és elindítja a videó- és hangközvetítést. Lehetőség van a hang és a kaputelefon funkció, valamint a kamera mozgásérzékelésének be- és kikapcsolására. A mozgásérzékeléssel kapcsolatos értesítések a fogaskerék ikonra kattintva, a Beállítások / Értesítési beállítások menüpontban konfigurálhatók. A kamera képes hangot továbbítani, de hangot érzékelni nem tud; a hangérzékelést a bázisállomás végzi.
Tipikus felhasználási mód: A bázisállomás hangot érzékel, és értesítést küld („Hang érzékelve"). A felhasználó ezt követően meghallgathatja a rögzített hangfájlt, vagy megnyithatja az élő közvetítést, hogy lássa és hallja a történéseket.

6. Mérések és riasztások értelmezése

A normál pulzusértékek babánként eltérőek lehetnek. A normál tartomány határértékeit gyermeke igényeihez igazíthatja; ehhez koppintson a „Részletes nézet" („Detailed View") alatt megjelenő adatokra. Az alkalmazás csak akkor küld riasztást, ha az értékek a normál tartományon kívül esnek. A riasztások tárgya és módja teljes mértékben testreszabható a Fogaskerék / Beállítások / Riasztási beállítások menüpontban (2.1., 2.2. ábra). Az értesítések minden esetben bekerülnek az alkalmazáson belüli archívumba (2.3. ábra). A riasztások fogadásához aktiválnia kell az értesítési ikont a kezdőképernyőn. Mélyalvás közben az SpO2-szint enyhén csökkenhet – az állapot értékeléséhez ezért az időbeli trendeket vegye figyelembe, ne az egyes mérési adatokat.

7. Megosztás partnerrel/gondozóval

A rendszerhez több felhasználó is hozzáférést kaphat, amennyiben a rendszergazda vagy a másik szülő meghívja őket. A különböző felhasználói típusok eltérő szintű hozzáféréssel rendelkeznek a funkciókhoz.
A meghívók a fogaskerék ikonra kattintva, a „Megosztás családtaggal" menüpont alatt hozhatók létre (2.4. ábra).
Minden felhasználó egyénileg adhatja meg az értesítésekre vonatkozó beállításait.

8. Gyakori kérdések és hibaelhárítás

A gyakori kérdések teljes körű és naprakész listájáért látogasson el a Babysensor.com weboldalra.

9. Karbantartás és tisztítás

- A pántot enyhe szappanos vízzel tisztítsa – ne merítse víz alá!
- Az alapegységet száraz ruhával törölje át.
- Ne használja a terméket, ha azon látható sérülés tapasztalható.

10. Figyelmeztetések

***A kamerával, vagy anélkül ellátott BabySensor Relax termékek fogyasztói cikkek, nem pedig orvostechnikai eszközök.**
***Nem arra szolgálnak, hogy orvostechnikai eszközként funkcionáljanak, vagy ilyen eszközt helyettesítsenek.**
***Nem alkalmasak betegségek, rendellenességek vagy egyéb egészségügyi állapotok diagnosztizálására, gyógyítására, kezelésére, enyhítésére vagy megelőzésére.**
***Soha ne használja a termékeket a megfelelő gondoskodás, a szülői jelenlét, a józan ész vagy az orvosi ellátás helyettesítésére.**
***A termékeink által gyűjtött és megjelenített adatok pontossága nem feltétlenül felel meg az orvostechnikai eszközök vagy tudományos mérőműszerek pontossági szintjének.**
***A TERMÉKEK NEM NYÚJTANAK ORVOSI TANÁCSOT VAGY SZAKVÉLEMÉNYT. A TERMÉKEK KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK; NEM HELYETTESÍTIK ORVOS VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER TANÁCSÁT.**
***Termékeink egyike sem vészhelyzetek kezelésére szolgál. Ha úgy véli, hogy gyermeke orvosi vészhelyzetbe került, haladéktalanul hívja orvosát vagy a mentőszolgálatot.**
***Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakorvosi tanácsot, és ne késlekedjen annak kikérésével a termékeinkkel kapcsolatos információk miatt.**

A csuklópánt használata során – bizonyos felhasználóknál – a hosszan tartó érintkezés bőrirritációt vagy allergiás reakciót válthat ki. Az irritáció kockázatának csökkentése érdekében kövesse az alábbi négy egyszerű használati és ápolási tanácsot: (1) tartsa tisztán, (2) tartsa szárazon, (3) ügyeljen arra, hogy ne legyen túl laza vagy túl szoros, és (4) minden este cserélje át a másik karra (vagy lábra). További információért látogasson el weboldalunkra.

Termékeinket kizárólag az általunk biztosított felületen és útmutatásoknak megfelelően használhatja; egyéb hozzáférési módok alkalmazása tilos! Termékeinket kizárólag a jogszabályoknak megfelelően használja!

11. Megfelelőségi és biztonsági információk

A BabySensor CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az alábbi szabványoknak:
- RoHS-irányelv 2011/65/EU + (EU) 2015/863
- REACH-rendelet (EK) 1907/2006
- EMC-irányelv (EN 55032 / EN 55035 / EN 301 489 sorozat)
- EMF-kitettséggel kapcsolatos biztonság (EN 50663 / EN 62479)
- Biztonsági megfelelőség (EN IEC 62368-1)
- EMC-irányelv 2014/30/EU
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) 2014/53/EU

Ezek a szabványok biztosítják a csecsemők melletti biztonságos használatot,
valamint az európai biztonsági előírásoknak való teljes körű megfelelést.